

Juvora

CERTIFIED  
DISTRIBUTOR



AMANNGIRRBACH




## INSTRUCTIONS FOR USE

CERAMILL PEEK by JUVORA™

CE 1639

2	Dental Prosthesis Forms	33	Norske
3	English	36	Polski
6	Dansk	39	Português
9	Deutsch	42	Româna
12	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	45	Slovenčina
15	Español	48	Suomi
18	Français	51	Svenskt
21	Hrvatski	54	Türk
24	Italiano		
27	Magyar		
30	Nederlands		

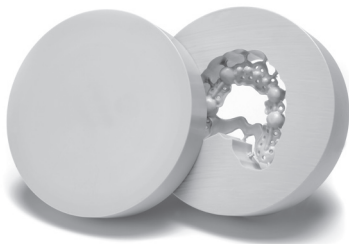

1. Telescope



2. Attachment



3. Implant Supported Superstructures



### Indications

---

For the manufacture of frameworks used in the production of:

- i) Full and partial removable dentures and overdentures;
- ii) Implant dentures and implant bars;
- iii) Anterior and posterior crowns, and posterior 3-unit bridges (maximum 1 pontic)

### Contraindications

---

Not to be used in bridges with 2 or more pontics.

### Precautions

---

Follow the milling parameter guidance given in the JUVORA™ processing guide:

- The minimum thickness of secondary crowns and matrix housings should not be less than 0.7 mm
- The minimum thickness for “conventional” retention grids should not be less than 2 mm.

- Minimum size of horizontal retainer in lower jaw 2 mm x 8 mm
- Minimum size of horizontal band in upper jaw 2 mm x 8 mm

### Material Information

---

JUVORA™ dental discs are manufactured from Invibio PEEK polymer

Form:	Solid
Odour:	Odourless.
pH (Value):	Not known.
Boiling Point (°C):	Not known.
Melting Point (°C):	343
Flash Point (°C):	Not known.
Auto Ignition Temperature (°C):	595
Oxidising Properties:	Not applicable.
Vapour Pressure (Pascal):	Not known.
Solubility (Water):	Insoluble.

## Processing Instructions

---

Detailed processing instructions are provided and must be observed by the end users (dental labs and technicians) when milling frameworks from the JUVORA™ dental discs. Dental labs that are supplied with the disc will be certified through Juvora Ltd, a process that involves assessment of their capability to follow the processing guidance to manufacture high quality frameworks and finished dentures where applicable using their existing equipment. This assessment will be completed by Juvora Ltd or their certified milling centres.

Find more information about the processing of PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

## Production

---

JUVORA™ dental discs blanks can only be processed on suitable milling machines with appropriate milling programs. The milling head must be suitable for machining PEEK polymer. Juvora Ltd recommends suitable adaptation of the CAM software by the software manufacturer to allow milling of JUVORA™. For an exact fit, a 5-axis milling machine of stable construction is recommended. Juvora Ltd also recommends cooling the milling head for more accurate milling and to prolong its useful life.\*See foot note.

## Prosthesis removal from the dental disc

---

Remove the prosthesis carefully from the blank using a hard metal cutter, and pay particular attention to the edges of the prosthesis.

### Finishing

---

For finishing work, hard metal cross-cut burs are recommended. Plain cross-cut burs or special fine-toothed burs are particularly suitable. Further fine finishing of horizontal bands and retainers can be carried out with a silicon polisher. Before high-gloss polishing, Juvora Ltd recommends brushing on the polishing motor. The device can be polished to a high gloss with a goat hair or cotton wool buffing wheel. For the insides of telescope attachments, Juvora Ltd recommends fine brushes. Use fine (white) polishing paste.

### Safety Information

---

While machining the JUVORA™ dental discs the following safety precautions are recommended:

- Dust mask or dust extraction
- Personal protective equipment (eye protection, gloves)

### Storage information

---

The Juvora™ dental disc should be stored in dry storage and avoid exposure to direct sunlight. The PEEK polymer from which the Juvora™ dental disc is made is stable and can be stored for an extended period of time (10 year shelf life). It has a working temperature range from cryogenic up to 250°C and hence the storage temperature range for the Juvora™ dental disc is any ambient temperature and humidity.

### Additional Information

---

For additional information contact [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com)

\*Note: Follow the instructions of your machine manufacturer regarding the processing of CERAMILL PEEK by JUVORA™. Download processing instructions @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

## Indikationer

---

Til fremstilling af rammer, der anvendes under fremstilling af:

- i) Komplette og partielle udtagelige tandproteser i over- og undermund;
- ii) Implanterede tandproteser og implantatbøjler;
- iii) Anteriore og posteriore kroner og posteriore 3-ledsbroer (maksimalt 1 tand).

## Kontraindikationer

---

Bør ikke anvendes i broer med 2 eller flere tænder.

## Forsigtighedsforanstaltninger

---

Følg retningslinjer for fræsningsparametre, der er angivet i JUVORA™ vejledning:

- Minimumtykkelse for sekundære kroner og matrix-huse må ikke være under 0,7 mm

- Minimumtykkelse for "konventionelle" retentionsbøjler må ikke være under 2 mm
- Minimumstørrelse for horisontal bøjle i underkæbe 2 mm × 8 mm
- Minimumstørrelse for horisontalt bånd i overkæbe 2 mm × 8 mm

## Materialeoplysninger

---

JUVORA™ dentalskiver fremstilles af Invibio PEEK polymer

Form:	Fast
Lugt:	Lugtfri
pH (værdi):	Ukendt
Kogepunkt (°C):	Ukendt
Smeltepunkt (°C):	343
Antændelsepunkt (°C):	Ukendt
Selvantændelsestemperatur (°C):	595
Oxiderende egenskaber:	Ikke relevant
Damptryk (Pascal):	Ukendt
Opløselighed (Vand):	Uopløseligt

### Bearbejdningsvejledning

---

Detaljeret behandlingsvejledning medfølger og skal følges af slutbrugerne (dentallaboratorier og -teknikere) ved fræsning af stativer i JUVORA™ dental-skive. Dentallaboratorier, der udstyres med skiven, vil blive certificeret af Juvora Ltd, en proces der omfatter vurdering af deres evne til at følge behandlingsvejledningen for at fremstille højkvalitetsbøjler og færdige proteser, hvor det er aktuelt, ved hjælp af deres eksisterende udstyr. Denne vurdering vil blive gennemført af Juvora Ltd eller deres certificerede fræsecentre.

Find flere Informationen über die behandling af PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

### Fremstilling

---

JUVORA™ dental-skiveemner kan kun behandles på egnede fræsemaskiner med egnede fræseprogrammer. Fræsehovedet skal være egnet til

bearbejdning af PEEK polymer. Juvora Ltd anbefaler passende tilpasning af CAM-software fra software-producenten for at muliggøre fræsning af JUVORA™ denta-skive. For en nøjagtig tilpasning anbefales en 5-akset fræsemaskine med stabil konstruktion. Juvora Ltd anbefaler også køling af fræsehovedet for mere nøjagtig fræsning og for at forlænge dets levetid.\*Se fodnote.

### Udtagning af protesen fra dentalskiven

---

Udtag protesen forsigtigt fra emnet med en hårdmetalskærer og vær specielt opmærksom på kanterne af protesen.



## Polering

---

Ved poleringsarbejde anbefales det at anvende hårdmetalkrydsbor. Almindelige krydsbor eller specielle fintandede bor er særligt velegnede. Yderligere finpolering af horisontale bånd og bøjler kan udføres med silikone-polererhoved. Før højglanspolering anbefaler Juvora at børste på poleremotoren. Anordningen kan poleres op til højglans ved hjælp af et gedehårs- eller bomuldspolerehjul. Til indersiden af teleskopmonterede implantater anbefaler Juvora Ltd fine børster. Brug fin (hvid) polerepasta.

## Sikkerhedsinformation

---

Under bearbejdning af JUVORA™ dental-skive anbefales følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Støvmaske eller støvudsugning
- Personligt beskyttelsesudstyr (øjebeskyttelse, handsker)

## Opbevaringsinformation

---

JUVORA™ dental-skive skal opbevares tørt og beskyttet mod direkte sollys. PEEK polymer som JUVORA™ dental-skive er fremstillet af, er stabilt og kan opbevares over en længere periode (10 års holdbarhed). Det har et arbejdstemperaturområde fra kryogent op til 250 °C, og derfor er opbevaringstemperaturområdet for JUVORA™ dental-skive enhver normal omgivende temperature og fugtighed.

## Yderligere oplysninger

---

For yderligere oplysninger kontaktes [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\* Bemærk: Følg anvisningerne fra din maskine producent vedrørende behandlingen af CERAMILL PEEK af JUVORA™. Hent behandlingsinstruktioner @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Anwendungsgebiete

---

Zur Herstellung von Gerüsten zur Produktion von:

- i) vollständig und teilweise herausnehmbarem Zahnersatz,
- ii) Implantat getragener Zahnersatz und Implantat getragener Steg,
- iii) Front- und Seitenzahnkronen sowie dreigliedrigen Seitenzahnbrücken (mit maximal einem Zwischenglied).

### Gegenanzeigen

---

Nicht zur Verwendung für Brücken mit 2 oder mehr Zwischengliedern bestimmt.

### Vorsichtsmaßnahmen

---

Beachten Sie bitte die Hinweise zu den Schleifparametern in der Juvora Bearbeitungsanleitung:

- Die Mindestdicke von sekundären Kronen und Matrixgehäusen sollte nicht weniger als 0,7 mm betragen.

- Die Mindestdicke von „konventionellen“ Lochretentionen sollte nicht weniger als 2 mm betragen.
- Die Mindestgröße des horizontalen Retainers im Unterkiefer beträgt 2 mm x 8 mm.
- Die Mindestgröße des horizontalen Bands im Oberkiefer beträgt 2 mm x 8 mm.

### Materialinformation

---

JUVORA™ dentalscheiben bestehen aus Invibio PEEK Polymer

Form:	Massiv
Geruch:	Geruchlos.
pH (-Wert)	Unbekannt.
Kochpunkt (°C):	Unbekannt.
Schmelzpunkt (°C):	343
Flammpunkt (°C):	Unbekannt.
Selbstentzündungstemperatur (°C):	595
Oxidierende Eigenschaften:	Nicht zutreffend.
Dampfdruck (Pascal):	Unbekannt.
Löslichkeit (Wasser):	Unlöslich.

## Hinweise zur Bearbeitung

---

Ausführliche Bearbeitungsanweisungen werden mitgeliefert und müssen beim Schleifen von Gerüsten mithilfe der JUVORA™ dentalscheiben von den Endnutzern (Dentallabors und Zahntechniker) beachtet werden. Dentallabors, die die Schleifscheibe erhalten, werden von Juvora Ltd zertifiziert. Im Rahmen dieses Verfahrens wird überprüft, wie gut sie die Bearbeitungshinweise zur Herstellung von hochwertigen Gerüsten und ggf. fertigem Zahnersatz unter Verwendung der vorhandenen Ausrüstung befolgen können. Diese Bewertung wird von Juvora Ltd oder deren zertifizierten Schleifzentren durchgeführt.

Weitere Informationen zur Verarbeitung von PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

## Produktion

---

JUVORA™ dentalscheiben-Rohlinge können nur auf geeigneten

Schleifmaschinen mit entsprechenden Schleifprogrammen bearbeitet werden. Der Schleifkopf muss zum Schleifen von PEEK polymer geeignet sein. Juvora Ltd empfiehlt die angemessene Anpassung der CAM-Software durch den Software-Hersteller zum Schleifen von JUVORA™ dentalscheiben. Für exakte Anpassung wird eine fünffachsigte Schleifmaschine stabiler Bauart empfohlen. Juvora Ltd empfiehlt auch die Kühlung des Schleifkopfes für präziseres Schleifen und zur Verlängerung der Nutzungsdauer. \*Siehe Fußnote.

## Entfernung der Prothese von der Dentalscheibe

---

Entfernen Sie die Prothese vorsichtig mit einem harten Metallschneider aus dem Rohling und achten Sie dabei besonders auf die Prothesenränder.

## Nachbearbeitung

---

Zur Nachbearbeitung empfiehlt sich die Verwendung von Querhiebböhrern aus Hartmetall. Besonders geeignet

sind glatte Querhiebbohrer oder spezielle, feingezahnte Bohrer. Die weitere Feinbearbeitung kann mit einem Silikonpolierer durchgeführt werden. JUVORA™ empfiehlt vor der Hochglanzpolierung eine Polierung mittels Bürste am Poliermotor. Die Hochglanzpolierung des Produkts kann mit einer Schwabbel Scheibe aus Ziegenhaar oder Baumwolle erfolgen. Für die Innenflächen von Teleskoparbeiten empfiehlt Juvora Ltd die Verwendung feiner Bürsten. Verwenden Sie feine (weiße) Polierpaste.

### Sicherheitsangaben

---

Bei der Bearbeitung der JUVORA™ dentalscheiben werden die folgenden Sicherheitsvorkehrungen empfohlen:

- Staubmaske oder Staubabsaugung
- Personenschutz ausrüstung (Augenschutz, Handschuhe)

### Hinweise zur Aufbewahrung

---

JUVORA™ dentalscheiben sollten trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden. Das polymer PEEK, aus dem die JUVORA™ dentalscheiben gefertigt werden, ist stabil und kann langfristig gelagert werden (Dauer der Haltbarkeit: 10 Jahre). Der Verarbeitungstemperaturbereich reicht von Tiefsttemperaturen bis 250 °C, sodass die JUVORA™ dentalscheiben bei beliebiger Umgebungstemperatur und -feuchte gelagert werden können.

### Weitere Informationen

---

Weitere Informationen erhalten Sie von [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Maschinenherstellers bezüglich der Verarbeitung von CERAMILL PEEK von JUVORATM. Download Verarbeitungshinweise @ [www.amanggirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanggirrbach.com/instruction-manuals).

### Ενδείξεις

Για την κατασκευή σκελετών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή:

- Πλήρων και μερικών αφαιρούμενων οδοντοστοιχιών και επένθετων οδοντοστοιχιών,
- Οδοντοστοιχιών επί εμφυτευμάτων και μπαρών εμφυτεύματος,
- Πρόσθιων ή οπίσθιων στεφανών, καθώς και οπίσθιων γεφυρών 3 τεμαχίων (1 γεφύρωμα κατά το μέγιστο).

### Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιηθεί σε γέφυρες με 2 ή περισσότερα γεφυρώματα.

### Προφυλάξεις

Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις παραμέτρους χιλιοστών που παρέχονται στον οδηγό της JUVORA™:

- Το ελάχιστο πάχος για τις δευτερεύουσες στεφάνες και τα περιβλήματα μήτρας δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 0,7 mm

- Το ελάχιστο πάχος για τα «συμβατικά» συγκρατητικά πλέγματα δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2 mm
- Ελάχιστο μέγεθος για τον οριζόντιο συγκρατητήρα στην κάτω γνάθο 2 mm x 8 mm
- Ελάχιστο μέγεθος για τον οριζόντιο δακτύλιο στην άνω γνάθο 2 mm x 8 mm

### Πληροφορίες για το υλικό

Οι οδοντοτεχνικοί δίσκοι JUVORA™ κατασκευάζονται από πολυμερές PEEK της εταιρίας Invisio

Μορφή:	Συμπαγής
Οσμή:	Άοσμο.
pH (Τιμή):	Άγνωστο.
Σημείο βρασμού (οC):	Άγνωστο.
Σημείο τήξης (οC):	343
Σημείο ανάφλεξης (οC):	Άγνωστο.
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης (οC):	595
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Μη εφαρμοστέο.
Τάση ατμών (Pascal):	Άγνωστη.
Διαλυτότητα (νερό):	Αδιάλυτο.

### Οδηγίες κατεργασίας

---

Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατεργασίας οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους τελικούς χρήστες (οδοντοτεχνικά εργαστήρια και οδοντοτεχνίτες) κατά το φρεζάρισμα σκελετών από τον οδοντοτεχνικό δίσκο JUVORA™. Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια που προμηθεύονται το δίσκο πιστοποιούνται από την Juvora Ltd, με μια διαδικασία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ικανότητάς τους να ακολουθούν την καθοδήγηση κατεργασίας για την κατασκευή σκελετών υψηλής ποιότητας και τελικών οδοντοστοιχιών, όποτε απαιτείται, χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό τους. Αυτή η αξιολόγηση διεκπεραιώνεται από την Juvora Ltd ή από τα πιστοποιημένα κέντρα φρεζαρίσματος.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του PEEK στο [www.jovoradental.com/academy](http://www.jovoradental.com/academy)

### Παραγωγή

---

Οι ακατέργαστοι οδοντοτεχνικοί δίσκοι Juvora™ μπορούν να υποβληθούν σε κατεργασία μόνο σε κατάλληλους φρεζαδόρους με κατάλληλα

προγράμματα φρεζαρίσματος. Η κεφαλή φρεζαρίσματος πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μηχανουργική κατεργασία πολυμερούς PEEK. Η Juvora Ltd συνιστά την κατάλληλη προσαρμογή του λογισμικού CAM από τον κατασκευαστή του λογισμικού προκειμένου να είναι δυνατό το φρεζάρισμα του οδοντοτεχνικού δίσκου JUVORA™. Για ακριβή προσαρμογή, συνιστάται η χρήση φρεζαδόρου 5 αξόνων σταθερής κατασκευής. Η Juvora Ltd συνιστά επίσης της ψύξη της κεφαλής φρεζαρίσματος για πιο ακριβές φρεζάρισμα και για την παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της. \*Βλ. υποσημείωση.

### Αφαίρεση πρόσθεσης από τον οδοντοτεχνικό δίσκο

---

Αφαιρέστε προσεκτικά την πρόσθεση από το υπόλοιπο υλικό χρησιμοποιώντας φρέζα σκληρού μετάλλου, προσέχοντας ιδιαίτερα τα άκρα των στεφανών.

### Τελείωση

---

Για την εργασία τελείωσης, συνιστάται η χρήση φρεζών εγκάρσιας τομής από σκληρό μέταλλο. Συγκεκριμένα, κατάλληλες για χρήση είναι απλές φρέζες εγκάρσιας

τομής ή ειδικές φρέζες ευθείας οδόντωσης. Επιπλέον τελείωση οριζόντιου δακτυλίου και συγκρατητήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με στίλβωτή πυριτίου. Πριν από στίλβωση υψηλής στίλβνότητας, η Juvora Ltd συνιστά βούρτσοιμα στη μηχανή στίλβωσης. Για τη στίλβωση υψηλής στίλβνότητας της συσκευής, χρησιμοποιήστε τροχό λείανσης από τρίχα κατσίκας ή ακατέργαστο βαμβάκι. Για το εσωτερικό των τηλεσκοπικών εξαρτημάτων, η Juvora Ltd συνιστά τη χρήση λεπτής βούρτσας. Χρησιμοποιείτε λεπτή (λευκή) πάστα στίλβωσης.

### Πληροφορίες για την ασφάλεια

---

Κατά τη μηχανουργική κατεργασία του οδοντοτεχνικού δίσκου JUVORA™, συνιστάται να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μάσκα σκόνης ή απορρόφηση σκόνης
- Μέσα ατομικής προστασίας (προστασία ματιών, γάντια)

### Πληροφορίες φύλαξης

---

Ο οδοντοτεχνικός δίσκος JUVORA™ πρέπει να

φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Το πολυμερές PEEK από το οποίο κατασκευάζεται ο οδοντοτεχνικός δίσκος JUVORA™ είναι σταθερό και μπορεί να φυλάσσεται για μεγάλες χρονικές περιόδους (10ετής διάρκεια ζωής). Διαθέτει εύρος θερμοκρασίας χρήσης από κρυογενικές θερμοκρασίες έως και 250°C. Ως εκ τούτου, το εύρος θερμοκρασίας φύλαξης του οδοντοτεχνικού δίσκου Juvora™ είναι οποιοδήποτε επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

### Πρόσθετες πληροφορίες

---

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\* Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την επεξεργασία των CERAMILL PEEK από το JUVORA™. Κατεβάστε τις οδηγίες επεξεργασίας από το [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Indicaciones

---

Para la fabricación de los marcos utilizados en la producción de:

- i) dentaduras y sobredentaduras completas y parciales extraíbles;
- ii) dentaduras sobre implantes y barras de implantes;
- iii) coronas anteriores y posteriores, y puentes posteriores de 3 unidades (1 diente artificial como máximo).

### Contraindicaciones

---

No debe usarse en puentes con dos o más dientes artificiales.

### Precauciones

---

Siga la guía de parámetros de fresado que se ofrece en el manual de procesamiento de JUVORA™:

- El grosor mínimo de las coronas secundarias y las carcasas de la matriz no debe ser inferior a 0,7 mm
- El grosor mínimo de las rejillas de retención «convencionales» no debe ser inferior a 2 mm

- El tamaño mínimo del retenedor horizontal de la mandíbula inferior es de 2 mm x 8 mm
- El tamaño mínimo de la banda horizontal en la mandíbula superior es de 2 mm x 8 mm

### Información sobre el material

---

Los discos dentales JUVORA™ se fabrican a partir del polímero PEEK de Invibio

Forma:	Sólida
Olor:	Inodoro
ph (valor):	Desconocido
Punto de ebullición (°C):	Desconocido
Punto de fusión (°C):	343
Punto de inflamación (°C):	Desconocido
Temperatura de autoignición (°C):	595
Propiedades de oxidación:	No procede.
Presión de vapor (Pascal):	Desconocido
Solubilidad (agua):	Insoluble



## Instrucciones para el procesado

---

Se incluyen instrucciones detalladas para el procesado que deben ser respetadas por los usuarios finales (laboratorios odontológicos y técnicos) al fresar marcos a partir del disco dental JUVORA™. Los laboratorios odontológicos a los que se suministre el disco estarán certificados por Juvora Ltd, un proceso que conlleva la evaluación de su capacidad para seguir las indicaciones del procesado para fabricar marcos de gran calidad y dentadura acabadas, cuando proceda, utilizando su equipamiento existente. Juvora Ltd o sus centros de fresado certificados realizarán esta evaluación.

Encuentre más información sobre el procesamiento de PEEK @ [www.jovoradental.com/academy](http://www.jovoradental.com/academy)

## Producción

---

Las planchas del disco dental JUVORA™ solo se pueden procesar en máquinas

fresadoras adecuadas con los programas de fresado apropiados. La cabeza fresadora debe ser adecuada para trabajar el polímero PEEK. Juvora Ltd recomienda que el fabricante del software CAM lo adapte de manera adecuada para permitir el fresado del disco dental JUVORA™. Para obtener un ajuste exacto, se recomienda utilizar una fresadora de 5 ejes de construcción estable. Juvora Ltd también recomienda enfriar la cabeza fresadora para lograr un fresado más preciso y para prolongar su vida útil. \*Véase la nota al pie.

## Retirada de la prótesis del disco dental

---

Retire con cuidado la prótesis de la plancha usando una cuchilla de metal duro y preste especial atención a los bordes de la prótesis.

## Acabado

---

Se recomienda utilizar fresas de corte transversal hechas de metal duro para las tareas de acabado. Resultan

especialmente útiles las fresas planas de corte transversal o las fresas especiales de dientes finos. El superacabado de las bandas y los retenedores horizontales puede realizarse mediante un pulidor de silicona. Antes del pulido de abrillantado, Juvora recomienda cepillar el motor de pulimentado. El dispositivo puede pulirse hasta alcanzar un alto abrillantado usando una rueda de pulido de algodón o de pelo de cabra. Para el interior de los accesorios telescópicos, Juvora Ltd recomienda emplear cepillos finos. Utilice pasta pulidora fina (color blanco).

### Información sobre seguridad

---

Se recomienda adoptar las siguientes precauciones de seguridad al trabajar con el disco dental JUVORA™:

- Mascarilla para el polvo o extracción del polvo
- Equipo protector personal (gafas protectoras, guantes)

### Conservación

---

El disco dental JUVORA™ debe conservarse en un lugar seco y evitando la exposición a la luz solar directa. El polímero PEEK a partir del cual se elabora el disco dental JUVORA™ es estable y puede almacenarse durante un periodo de tiempo prolongado (10 años). Tiene una temperatura de trabajo de criogénica a 250 °C, por lo que el disco dental JUVORA™ puede almacenarse a cualquier temperatura y humedad ambiente.

### Información adicional

---

Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con: [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Nota: Siga las instrucciones del fabricante de su máquina con respecto al procesamiento de CERAMILL PEEK por JUVORA™. Descargue las instrucciones de procesamiento en [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

## Indications

---

Fabrication d'armatures destinées à la production de :

- i) Prothèses dentaires amovibles complètes et partielles, et prothèses hybrides ;
- ii) Prothèses dentaires sur implants et barres implantaire ;
- iii) Couronnes antérieures et postérieures, et bridges postérieurs 3 unités (maximum 1 pontique).

## Contre-indications

---

Ne doit pas être utilisé dans les bridges avec 2 pontiques ou plus.

## Précautions

---

Respectez les instructions relatives aux paramètres de fraisage fournies dans le guide de traitement :

- L'épaisseur minimum des couronnes secondaires et des logements de matrice ne doit pas être inférieure à 0,7 mm

- L'épaisseur minimum des grilles de rétention « conventionnelles » ne doit pas être inférieure à 2 mm
- Taille minimum de l'appareil de rétention horizontal dans la mâchoire inférieure : 2 mm x 8 mm
- Taille minimum de la bande horizontale dans la mâchoire supérieure : 2mm x 8mm

## Information sur le matériau

---

Les disques dentaires JUVORA™ sont en polymère PEEK de la société

Forme :	Solide
Odeur :	Inodore
pH (valeur)	Inconnu
Point d'ébullition (°C) :	Inconnu
Point de fusion (°C) :	343
Point d'éclair (°C) :	Inconnu
Point d'auto-inflammation (°C) :	595
Propriétés oxydantes :	Sans objet
Pression de vapeur (Pascal) :	Inconnu
Solubilité (dans l'eau) :	Insoluble.

### Instructions de traitement

---

Les utilisateurs finaux (laboratoires et techniciens dentaires) sont tenus de respecter les instructions de traitement détaillées lors du fraisage des armatures à partir de disques dentaires JUVORA™. Les laboratoires dentaires qui prennent en charge les disques doivent être certifiés par la société Juvora Ltd, afin d'évaluer leur capacité à observer les instructions fournies et à fabriquer des armatures et des prothèses dentaires (le cas échéant) de qualité supérieure à l'aide de leur équipement existant. Cet audit sera effectué par Juvora Ltd ou l'un de ses centres de fraisage certifiés.

Trouver plus d'informations sur le traitement de PEEK @ [www.jovoradental.com/academy](http://www.jovoradental.com/academy)

### Production

---

Seules des fraiseuses équipées de programmes de fraisage appropriés doivent être utilisées pour transformer

les disques dentaires JUVORA™ bruts. La tête de fraisage doit convenir à l'usinage de polymère PEEK. JUVORA™ Ltd recommande que le logiciel FAO soit adapté par le fabricant de logiciel pour permettre le fraisage du disque dentaire JUVORA™. L'utilisation d'une fraiseuse à 5 axes stable est recommandée pour obtenir un ajustage optimal. Juvora Ltd recommande également de refroidir la tête de fraisage pour permettre un fraisage précis et prolonger la vie utile de la tête. \* Voir note en bas de page.

### Retrait de la prothèse du disque dentaire

Retirer la prothèse du moule avec précaution à l'aide d'un cutter en métal dur, en accordant une attention particulière aux bords de la prothèse.

### Finissage

---

Pour le travail de finissage, il est recommandé d'utiliser des fraises à denture croisée en métal dur. Les fraises simples à denture croisée, ou les fraises

spéciales à denture fine, conviennent particulièrement. On peut effectuer un finissage complémentaire fin des bandes et des grilles de rétention horizontales avec un polissoir en silicone. Avant un polissage haute brillance, Juvora Ltd recommande le polissage avec moteur de polissage. Pour obtenir une haute brillance, on peut polir le dispositif avec un disque en poils de chèvres ou en toile de coton. Pour les parties intérieures des télescopes, Juvora Ltd recommande des brosses fines. Utiliser une pâte à polir fine (blanche).

## Consignes de sécurité

---

Respecter les consignes de sécurité suivantes lors de l'usinage du disque dentaire JUVORA™:

- Masque anti-poussières ou dispositif d'extraction de la poussière
- Equipement de protection personnelle (lunettes de sécurité, gants)

## Informations relatives au stockage

---

Le disque dentaire JUVORA™ doit être stocké dans un endroit sec et ne doit pas être exposé directement au soleil. Le polymère PEEK à partir duquel est fabriqué le disque dentaire Juvora™ est stable et peut être stocké pendant une période prolongée (durée de conservation de 10 ans). Sa plage de température d'utilisation est comprise entre les températures cryogéniques et 250 °C, la température de stockage du disque dentaire Juvora™ correspond donc à toute température et humidité ambiantes.

## Informations complémentaires

---

Pour de plus amples informations, veuillez contacter [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Remarque: Suivez les instructions du fabricant de votre machine concernant le traitement de CERAMILL PEEK par JUVORA™. Téléchargez les instructions de traitement @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Indikacije

Za izradu skeleta u proizvodnji:

- i) totalnih i parcijalnih mobilnih zubnih proteza i pokrovnih proteza;
- ii) proteza na implantatima i prečkama;
- iii) prednjih i stražnjih krunica, te stražnjih mostova s 3 jedinice (maksimalno 1 međučlan).

### Kontraindikacije

Nije za uporabu u mostovima s 2 ili više međučlanova.

### Mjere opreza

Slijedite upute za parametre glodanja dane u vodiču za JUVORA™ postupak:

- Minimalna debljina sekundarnih kruna i kućišta matrica ne smije biti manja od 0,7 mm
- Minimalna debljina "konvencionalnih" retencijskih rešetki ne smije biti manja od 2 mm
- Minimalna veličina vodoravnog držača

u donjoj čeljusti 2 mm x 8 mm

- Minimalna veličina vodoravne trake u gornjoj čeljusti 2 mm x 8 mm

### Tehnički podaci o materijalu

JUVORA™ dentalni diskovi su izrađeni od polimera Invibio PEEK.

Oblik:	Čvrsti
Miris:	Bez mirisa.
pH (vrijednost):	Nije poznato.
Vrelište (°C):	Nije poznato.
Talište (°C):	343
Plamište (°C):	Nije poznato.
Temperatura samopaljenja (°C):	595
Oksidacijska svojstva:	Nije primjenjivo.
Tlak para (Pa):	Nije poznato.
Topivost (voda):	Netopivo.

## Upute za obradu

---

Dane su detaljne upute i krajnji korisnici (zubotehnički laboratoriji i tehničari) ih se moraju pridržavati pri brušenju skeleta izrađenih od JUVORA™ dentalnog diska. Juvora Ltd će izdati atest zubnim laboratorijima koji su snabdjeveni diskovima, postupak koji uključuje ocjenu njihove sposobnosti da se pridržavaju smjernica za obradu u proizvodnji visoko kvalitetnih skeleta i gotovih proteza gdje je to primjenjivo, koristeći svoju postojeću opremu. Te ocjene će zaključivati Juvora Ltd ili njihovi atestirani centri za obradu glodanjem.

Više informacija o obradi PEEK @ [www.jovoradental.com/academy](http://www.jovoradental.com/academy)

## Proizvodnja

---

Sirovi JUVORA™ dentalni disk se može obrađivati samo na prikladnim glodalicama s odgovarajućim programima za glodanje. Glava glodalice mora biti prikladna za obradu PEEK

polimera. Juvora Ltd preporučuje da proizvođač softvera izvrši prikladnu prilagodbu CAM softvera kako bi se omogućilo glodanje JUVORA™ dentalnog diska. Za točnu izradu preporučuje se glodalica s 5 osi. Juvora Ltd također preporučuje hlađenje glave glodalice za preciznije glodanje i njen dulji vijek trajanja. \*Vidi napomenu.

## Skidanje proteze sa dentalnog diska

---

Pažljivo skinite protezu sa sirovog diska koristeći sjekač od tvrdog metala, a osobitu pozornost obratite na rubove proteza.

## Završna obrada

---

Za završne radove, preporučuju se cross-cut svrdla od tvrdog metala. Obična cross-cut svrdla ili posebno fina svrdla su naročito podesna. Nadalje fina završna obrada vodoravnih traka i držačamože se izvesti silikonskim

poliranjem. Prije poliranja za visoki sjaj, Juvora preporučuje četkanje na polir motoru. Naprava se može ispolirati do visokog sjaja kotačićem za poliranje s kozjom dlakom ili vatom. Za unutrašnjost teleskopskih priključaka, Juvora Ltd preporučuje fine četkice. Upotrijebite finu (bijelu) polirnu pastu.

### Podaci vezani za sigurnost

---

Pri strojnoj obradi JUVORA™ dentalnog diska preporučuju se slijedeće mjere sigurnosti:

- Maska protiv prašine ili odvodnja prašine
- Osobna zaštitna oprema (zaštita za oči, rukavice)

### Informacije o čuvanju

---

Juvora™ dentalni disk treba čuvati na suhom i treba izbjegavati izravno

izlaganje sunčevom svjetlu. Polimer PEEK iz kojeg je JUVORA™ dentalni disk izrađen je stabilan i može se čuvati dulje vrijeme (rok tajanja je 10 godina). Raspon radne temperature mu je od kriogene do 250°C te je stoga raspon temperature čuvanja za JUVORA™ dentalni disk bilo koja sobna temperatura i vlažnost.

### Dodatne informacije

---

Za dodatne informacije obratite se na [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Napomena: slijedite upute vašeg stroja proizvođača u pogledu obrade CERAMILL PEEK strane JUVORA™. Preuzmite upute za obradu @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).



## Indicazioni

---

Per la fabbricazione di strutture utilizzate nella produzione di:

- i) Protesi dentarie mobili e overdenture parziali o complete;
- ii) Protesi implantari e barre implantari;
- iii) Corone anteriori e laterali e ponti laterali a 3 unità (massimo 1 elemento intermedio).

## Controindicazioni

---

Non utilizzare in ponti con 2 o più elementi intermedi.

## Precauzioni

---

Per i parametri di fresatura seguire le indicazioni fornite nella guida al trattamento JUVORA™:

- Spessore minimo delle corone secondarie e degli alloggiamenti della matrice non inferiore a 0,7 mm
- Spessore minimo per griglie di ritenzione "convenzionali" non inferiore a 2 mm

- Dimensione minima del retainer orizzontale nella mascella inferiore di 2 mm x 8 mm
- Dimensione minima della banda orizzontale della mascella superiore di 2 mm x 8 mm

## Informazioni sul materiale

---

I dischi per odontoiatria JUVORA™ sono realizzati in polimero Invibio PEEK

Forma:	Solida
Odore:	Inodore
Valore pH:	Non noto
Punto di ebollizione (°C):	Non noto
Punto di fusione (°C):	343
Punto di infiammabilità (°C):	Non noto
Temperatura di autoinfiammabilità (C°):	595
Proprietà ossidanti:	Non applicabile
Pressione di vapore (Pascal):	Non nota
Solubilità in acqua:	Insolubile

### Istruzioni per il trattamento

---

Di seguito sono fornite le istruzioni dettagliate per il trattamento che devono essere seguite dagli utilizzatori finali (laboratori dentistici e tecnici) durante la fresatura delle strutture dai dischi per odontoiatria JUVORA™. I laboratori dentistici che utilizzano i dischi saranno certificati da Juvora Ltd, attraverso un processo che prevede la valutazione della capacità di seguire le linee guida di trattamento per produrre strutture di qualità elevata e dentiere eccellenti, se applicabile, utilizzando le proprie apparecchiature. La valutazione sarà effettuata da Juvora Ltd o dai propri centri di fresatura certificati.

Trova maggiori informazioni sul trattamento dei PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

### Produzione

---

I dischi per odontoiatria grezzi JUVORA™ possono essere trattati con

frese idonee dotate di programmi di fresatura appropriati. La testa della fresa deve essere adatta alla lavorazione meccanica del polimero PEEK. Juvora Ltd consiglia l'adattamento del software CAM da parte del produttore per permettere la fresatura dei dischi per odontoiatria JUVORA™. Per un adattamento di precisione si consiglia una fresatrice a 5 assi a struttura stabile. Per un funzionamento preciso e per prolungarne la durata di esercizio, Juvora Ltd raccomanda inoltre il raffreddamento della testa della fresatrice. \*Vedi nota a piè di pagina.

### Rimozione della protesi dal disco per odontoiatria

---

Rimuovere con cura la protesi dal disco grezzo utilizzando un taglierino di metallo duro e facendo particolare attenzione ai margini della protesi.

### Rifinitura

---

Per il lavoro di rifinitura utilizzare frese in metallo duro con taglio incrociato.

Particolarmente indicate sono le normali frese con taglio incrociato o le speciali frese a denti fini. L'ulteriore rifinitura delle bande e dei retainer orizzontali può essere fatta con un gommino lucidante. Prima della lucidatura a specchio, JUVORA™ raccomanda di spazzolare la lucidatrice. Il dispositivo può essere portato ad un alto grado di lucidatura a specchio utilizzando una buffing in pelo di capra o in cotone. Per la parte interna dei raccordi telescopici, Juvora Ltd raccomanda l'utilizzo di spazzole sottili. Utilizzare pasta lucidante fine (bianca).

## Informazioni sulla sicurezza

---

Durante la fresatura del disco per odontoiatria JUVORA™ si consiglia di adottare le seguenti precauzioni:

- Utilizzare una mascherina per la polvere o un dispositivo per l'estrazione della polvere
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti, dispositivi per la protezione degli occhi)

## Informazioni sulla conservazione

---

Il disco per odontoiatria JUVORA™ deve essere conservato in luogo asciutto al riparo dalla luce diretta del sole. Il polimero PEEK di cui il disco è fatto è stabile e può essere conservato per periodi prolungati (periodo di validità 10 anni). Ha una temperatura di lavoro che va da temperature criogeniche fino a 250°C; di conseguenza il disco per odontoiatria Juvora™ può essere conservato in ambienti con qualsiasi condizione di temperatura e umidità.

## Informazioni aggiuntive

---

Per ulteriori informazioni contattare [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Nota: seguire le istruzioni del costruttore della macchina rispetto al trattamento dei CERAMILL PEEK per JUVORA™. Scarica le istruzioni di elaborazione @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Javallatok

A vázakat a következők előállításához gyártották:

- teljesen vagy részlegesen kivehető fogpótlások és overdenture fogpótlások;
- beültetett fogpótlások és implantátumsorok;
- anterior és poszterior koronák, és háromegységes poszterior hidak (legfeljebb 1 hídváz).

### Ellenjavallatok

Nem használható 2 vagy több hídváz as hidak esetében.

### Óvintézkedések

Kövesse a frézelési útmutató paramétereit, amely a JUVORA™ feldolgozási útmutatásban található:

- A másodlagos koronák és mátrixházak vastagsága nem lehet kevesebb mint 0,7 mm.

- A „konvencionális” retenciós elemek vastagsága nem lehet kevesebb mint 2 mm.
- Az mandibulán a horizontális rögzítőelem mérete legalább 2 mm x8mm legyen.
- A maxillán a horizontális szalag mérete legalább 2 mm x8mm legyen.

### Anyaginformáció

A JUVORA™ fogászati faragható korongok Invibio PEEK polimerből készültek.

Forma:	Szilárd
Szag:	Szagtalan
pH (érték):	Nem ismert
Forráspont (°C):	Nem ismert
Olvadáspont (°C):	343
Gyulladáspont (°C):	Nem ismert
Öngyulladási hőmérséklet (°C):	595
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható
Gőznyomás (Pascal):	Nem ismert
Oldhatóság (Víz):	Oldhatatlan

## Feldolgozási előírás

---

A JUVORA™ fogászati faragható korongokra vonatkozó részletes feldolgozási előírás rendelkezésre áll, és a végfelhasználónak (fogászati laboratóriumok és fogtechnikusok) át kell tanulmányoznia azt a vázak frézélése előtt. A faragható korongokat alkalmazó fogászati laboratóriumok megkaphatják a Juvora Ltd tanúsítványát, miután igazolták, hogy a meglévő felszerelésüket használva és a gyártó útmutatásait követve képesek minőségi vázak és kész fogpótlások előállítására. Ezt a folyamatot a Juvora Ltd vagy a Juvora Ltd tanúsítványával rendelkező frézközpont végzi.

További információ a feldolgozás PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

## Elkészítés

---

A JUVORA™ fogászati faragható korongok csak az arra alkalmas,

valamint megfelelő frézelőprogrammal rendelkező frézelőgépek segítségével munkálthatók meg. A frézelőfejnek alkalmasnak kell lennie poliéterketon (PEEK) feldolgozására. A Juvora Ltd javasolja, hogy tegye alkalmassá a CAM programot a JUVORA™ fogászati faragható korongok frézelésére, a program gyártójának segítségével. A pontos illeszkedés érdekében stabil kialakítású, öttengelyű frézelőgép használata ajánlott. A Juvora Ltd ajánlja továbbá a frézelőfej hűtését a frézelés pontosságának, és a fej hasznos élettidejének növelése érdekében. \*Lásd a lábjegyzetet.

## Az protézis eltávolítása a fogászati faragható korongból

---

Kemény fémvágó segítségével óvatosan távolítsa el a protézist a tömbből, különös figyelemmel a fogpótlás széleire.

## Finírozás

---

A finírozási munkához kemény fémből készült, harántvágású fúrófej használata javallott. A célnak leginkább a sima harántvágású fúrófej vagy a különleges, finoman fogazott fúrófej a legmegfelelőbb. A vízszintes szalagok, valamint a rögzítőelemek további finírozására szilikonos polírozó használható. Az Invibio javasolja a polírozó motor használatát a fényesre polírozás előtt. Az eszköz kecskeszőrrel vagy pamut polírozókoronggal polírozható fényesre. A teleszkópos illeszkedések belső részéhez a Juvora Ltd lágysörtéjű keféjét javasol. Használjon finom (fehér) polírozópasztát.

### Biztonsági tájékoztató

---

A JUVORA™ fogászati faragható korong készítése közben ajánlott betartani a következő óvintézkedéseket:

- Pormaszk vagy porelszívás alkalmazása.
- Személyi védőfelszerelés (szemvédelem, kesztyűk) használata.

### Tárolási információk

---

A JUVORA™ fogászati faragható korongot nem szabad száraz helyen tárolni, valamint nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. A JUVORA™ fogászati faragható korong stabil szerkezetű és hosszú időn át tárolható (tárolhatósági ideje: 10 év) PEEK polimerből készült. Munkahőmérséklete a kriogén állapottól 250 °C-ig terjed, így a Juvora™ fogászati faragható korong bármilyen környezeti hőmérsékleten és páratartalom mellett tárolható.

### További adatok

---

További információkért írjon a következő e-mail címre: [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Megjegyzés: Kövesse az utasításokat a gépgyártó feldolgozása tekintetében Ceramill PEEK által JUVORA™. Letöltés feldolgozási utasítások @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Indicaties

Voor het vervaardigen van onderstructuren die worden gebruikt bij de productie van:

- i) Volledige en partiële uitneembare tandprothesen en overkappingsprothesen;
- ii) implantaatprothesen en implantaatstaven;
- iii) Anterieure en posterieure kronen, en posterieure bruggen met 3 elementen (maximaal 1 zwevende kroon).

### Contra-indicaties

Niet gebruiken bij bruggen met 2 of meer zwevende kronen.

### Voorzorgsmaatregelen

Volg de gegeven richtlijn voor de freesparameter in de verwerkingshandleiding van JUVORA™:

- de minimale dikte voor secundaire kronen en voor matrixbehuizingen mag niet minder zijn dan 0,7 mm
- de minimale dikte voor 'conventionele' retentierasters mag niet minder zijn dan 2 mm
- de minimale afmeting van de horizontale retainer in de onderkaak is 2 mm x 8 mm

- de minimale afmetingen van de horizontale band in de bovenkaak is 2 mm x 8 mm

### Materiaalinformatie

Tandheelkundige schijven van JUVORA™ worden vervaardigd van Invibio PEEK polymeer.

Vorm:	Vast
Geur:	Geurloos.
pH (waarde)	Niet bekend.
Kookpunt (°C):	Niet bekend.
Smeltpunt (°C):	343
Vlampunt (°C):	Niet bekend.
Zelfontstekingstemperatuur (°C):	595
Oxiderende eigenschappen:	Niet van toepassing.
Dampdruk (Pascal):	Niet bekend.
Oplosbaarheid (in water):	Niet oplosbaar.

### Verwerkingsinstructies

---

Er worden gedetailleerde verwerkingsinstructies gegeven die door de eindgebruikers (tandtechnisch laboratoria en technici) in acht moeten worden genomen bij het frezen van een raamwerk voor de tandheelkundige schijven van JUVORA™. Tandtechnische laboratoria waaraan de disc wordt geleverd worden gecertificeerd via Juvora Ltd, een proces waarbij een beoordeling plaatsvindt van hun vermogen tot het volgen van de verwerkingsrichtlijnen bij het produceren van raamwerken en definitieve prothesen van hoge kwaliteit waarbij waar van toepassing de eigen aanwezige apparatuur wordt gebruikt. Deze beoordeling wordt verricht door Juvora Ltd of door een van haar gecertificeerde freescentra.

Vind meer informatie over de verwerking van PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

### Productie

---

Nieuwe maagdelijke tandheelkundige schijven van JUVORA™ kunnen uitsluitend worden verwerkt op hiervoor geschikte freesmachines die zijn uitgerust met de juiste freesprogramma's. De freeskop moet geschikt zijn voor het machinaal verwerken van PEEK polymeer. Juvora Ltd adviseert het op de juiste wijze laten aanpassen van de CAM-software door de softwarefabrikant, zodat frezen van tandheelkundige schijven van JUVORA™ mogelijk is. Voor een exacte pasvorm wordt een 5-assige freesmachine in een stabiele constructie aanbevolen. Voor nauwkeuriger freeswerk en voor het verlengen van de levensduur adviseert Juvora Ltd ook koeling van de freeskop.\* Zie voetnoot.

### Verwijderen van de prothese uit de tandheelkundige schijf

---

Verwijder de prothese voorzichtig uit de disc met behulp van een harde metalen



cutter, en let hierbij met name op de randen van de prothese.

## Nabewerking

---

Voor de nabewerking worden hardmetalen cross-cut-boortjes aanbevolen. Hiervoor zijn met name vlakke cross-cut-boortjes of speciale fijngetande boortjes geschikt. Verder fijn nabewerken van horizontale banden en retainers kan worden verricht met een siliconen polijstmiddel. Juvora Ltd adviseert voorafgaand aan polijsten met hoogglans te sproeien met behulp van de polijstmotor. Het product kan met een hoogglansmiddel worden gepolijst met een geitenharen of katoenen polijstschiif. Voor de binnenkant van telescoophulpstukken adviseert Juvora Ltd kleine borstels. Gebruik fijne (witte) polijstpasta.

## Veiligheidsinformatie

---

De volgende veiligheidsmaatregelen worden geadviseerd tijdens het met de machine verwerken van de tandheelkundige schijf van JUVORA™:

- stofmasker of stofextractie
- persoonlijke beschermende uitrusting

(oogbescherming, handschoenen)

## Informatie over opslag

---

De tandheelkundige schijf van JUVORA™ moet in een droge opslagruimte worden bewaard en blootstelling aan direct zonlicht moet worden vermeden. Het PEEK polymeer waar de tandheelkundige schijf van JUVORA™ van is gemaakt is stabiel en kan gedurende langere tijd worden opgeslagen (de houdbaarheidstermijn is 10 jaar). Het bereik van de werkt temperatuur loopt van cryogeen tot aan 250 °C en daarom kan de tandheelkundige schijf van JUVORA™ in elke omgevingstemperatuur en bij elke vochtigheidsgraad worden opgeslagen.

## Aanvullende informatie

---

Neem voor aanvullende informatie contact op via [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Opmerking: Volg de instructies van uw machine fabrikant met betrekking tot de verwerking van Ceramill PEEK door JUVORA™. Download verwerkingsinstructies @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Indikasjoner

---

For produksjon av strukturer som brukes ved fremstilling av:

- i) fullt og delvis uttakbare tannproteser og overtannproteser,
- ii) implantatproteser og implantatstenger,
- iii) kroner for fremre og bakre tenner, og broer med tre enheter for bakre tenner (maks. én kunstig tann).

### Kontraindikasjoner

---

Skal ikke brukes i broer med to eller flere kunstige tenner.

### Forholdsregler

---

Følg parameterveiledningen for fresing gitt i JUVORA™ instruksjonene for håndtering:

- Minimumstykkelse for sekundærkroner og matriseholdere må ikke være mindre enn 0,7 mm

- Minimumstykkelse for "konvensjonelle" retensjonsnett må ikke være mindre enn 2 mm
- Minimumsstørrelse for horisontal holder i nedre kjeve: 2 × 8 mm
- Minimumsstørrelse for horisontalt bånd i øvre kjeve: 2 × 8 mm

### Materialinformasjon

---

JUVORA™-dentalplater er fremstilt i Invibio PEEK polymer.

Form:	Fast
Lukt:	Luktfri.
pH (Verdi)	Ukjent.
Kokepunkt (°C):	Ukjent.
Smeltepunkt (°C):	343
Flammepunkt (°C):	Ukjent.
Selvantennelsestemperatur (°C):	595
Oksidasjonsegenskaper:	Ikke relevant.
Damptrykk (Pascal):	Ukjent.
Oppløselighet (vann):	Uoppløselig.

## Instruksjoner for håndtering

---

Detaljerte instruksjoner for håndtering medfølger og må følges av sluttbrukerne (tanntekniske laboratorier og tannteknikere) ved fresing av strukturer fra JUVORA™-dentalplate. Tanntekniske laboratorier som benytter dentalplatene, vil bli sertifisert av Juvora Ltd gjennom en prosedyre som involverer vurderinger av deres evne til å følge håndteringsveiledningene for å fremstille strukturer av høy kvalitet og ferdige tannproteser ved hjelp av eget utstyr. Denne vurderingen vil bli foretatt av Juvora Ltd eller dennes sertifiserte fresecentre.

Finn mer informasjon om behandlingen av PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

## Produksjon

---

JUVORA™-dentalplater skal kun behandles på egnede fresemaskiner med egnede freseprogrammer. Fresehodet må være egnet for maskinbehandling

av PEEK polymer. Juvora Ltd anbefaler at CAM-programvaren tilpasses av programvareprodusenten for å legge til rette for fresing av JUVORA™ dentalplate. For best tilpasning anbefales en fresemaskin med fem akser og stabil konstruksjon. Juvora Ltd anbefaler også kjøling av fresehodet for mer nøyaktig fresing og lengst mulig levetid. \*Se fotnote.

## Protesefjerning fra dentalplaten

---

Fjern protesen forsiktig fra selve platen ved hjelp av en hardmetallskjærer, og vær spesielt forsiktig med protesens kanter.

## Avslutning

---

Det anbefales harde, tverrrskårne bor for avslutningsarbeid. Glatte, tverrrskårne bor eller spesiallagde, fintannede bor passer spesielt bra. Videre avslutning av horisontale bånd og holdere kan utføres med en silisiumpolerer. Før høyglanspolering anbefaler Juvora pussing på poleringsmotoren. Enheten  
JUVORA™ Ref: IDCM-JUV-IFU-0004 Rev 5 34

kan poleres til høy glans med en polerskive av geitehår eller bomull. JUVORA™ anbefaler fine børster for innsidene av teleskoptilleggene. Bruk finkornet (hvit) polerpasta.

### Sikkerhetsinformasjon

---

Ved maskinering av JUVORA™-dentalplaten anbefales følgende forholdsregler:

- Støvmaske eller støvuttrekk
- Personlig verneutstyr (vernebriller, hansker)

### Oppbevaringsinformasjon

---

Juvora™-dentalplaten skal oppbevares tørt og ikke utsettes for direkte sollys. PEEK polymeren som Juvora™-dentalplaten er lagd av, er stabil og kan oppbevares i en utvidet periode (10 års holdbarhet). Den har et temperaturområde fra kryogenisk

til 250 °C, og lagringstemperaturen for JUVORA™-dentalplaten er dermed ved hvilken som helst romfuktighet og -temperatur.

### Tilleggsinformasjon

---

For mer informasjon kan du kontakte [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com)

\*Merk: Følg instruksjonene fra maskinprodusenten om behandling av CERAMILL PEEK av JUVORA™. Last ned behandlingsinstruksjoner @ [www.amanggirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanggirrbach.com/instruction-manuals).

## Zastosowanie

---

Do przygotowania płyty podstawy wykorzystywanej w produkcji

- i) całkowitych i częściowych ruchomych protez zębowych i protez nakładowych;
- ii) protez i belek mocowanych na implantach;
- iii) koron zębów przednich i tylnych, oraz tylnych mostów 3-elementowych (maksymalnie 1 przęsło).

## Przeciwwskazania

---

Nie stosować w mostach zawierających 2 lub więcej przęseł.

## Środki ostrożności

---

Przestrzegać wytycznych dotyczących frezowania podanych w instrukcji obróbki firmy JUVORA™:

- Minimalna grubość koron wtórnych i metalowych matryc nie może być mniejsza niż 0,7 mm
- Minimalna grubość

„konwencjonalnych” siatek mocujących nie powinna być mniejsza niż 2 mm

- Minimalny rozmiar poziomej klamry mocującej na dolnej szczęce 2 mm × 8 mm
- Minimalny rozmiar łącznika poziomego na górnej szczęce 2 mm × 8 mm

## Informacje o materiale

---

Płyty JUVORA™ do protez dentystycznych są wytwarzane z polimeru Invibio PEEK.

Postać:	Stała
Zapach:	Bez zapachu.
Wartość pH:	Nieznana.
Temperatura wrzenia (°C):	Nieznana.
Temperatura topnienia (°C):	343
Temperatura zapłonu (°C):	Nieznana.
Temperatura samozapłonu (°C):	595
Właściwości utleniające:	Nie dotyczy.
Prężność pary (Pascal):	Nieznana.
Rozpuszczalność (Woda):	Nierozpuszczalny.

## Instrukcja postępowania

---

Dostarczane są szczegółowe instrukcje postępowania, które muszą być przestrzegane przez użytkowników końcowych (laboratoria dentystyczne i techników) podczas frezowania podstaw z płyt dentystycznych firmy JUVORA™. Laboratoria dentystyczne korzystające z płyt otrzymają certyfikat Juvora Ltd w drodze procesu obejmującego ocenę ich możliwości w zakresie przestrzegania wytycznych dotyczących produkcji wysokiej jakości podstaw do protez oraz końcowych protez za pomocą posiadanego wyposażenia. Oceny tych możliwości dokona firma Juvora Ltd lub przedstawiciele jej certyfikowanych centrów frezowania.

Znajdź więcej informacji na temat przetwarzania PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

## Produkcja

---

Płyty dentystyczne JUVORA™ do protez zębowych mogą być przygotowywane

tylko w odpowiednich urządzeniach do frezowania, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Frezarka protetyczna musi nadawać się do obróbki polimeru PEEK. Firma Juvora Ltd zaleca odpowiednie przystosowanie oprogramowania CAM przez producenta oprogramowania, aby umożliwić frezowanie płyty Juvora Ltd do protez dentystycznych. W celu dokładnego dopasowania zaleca się zastosowanie 5-osiowej frezarki o stabilnej konstrukcji. Firma Juvora Ltd zaleca również schładzanie głowicy frezarki, aby uzyskać dokładniejsze frezowanie i przedłużyć okres użytkowania. \*Patrz przypis.

## Usuwanie protezy z płyty dentystycznej

---

Ostrożnie wyjąć protezę z formy za pomocą cążków, zwracając szczególną uwagę na brzegi protezy.

## Obróbka ostateczna

---

Do obróbki ostatecznej zaleca się stosowanie twardych metalowych frezów

ze szlifem poprzecznych. Szczególnie nadają się do tego zwykle frezy ze szlifem poprzecznym lub specjalne frezy z drobnymi ząbkami. Dalszą, dokładniejszą obróbkę poziomych łączników i klamer mocujących można przeprowadzić przy użyciu silikonowej końcówki polerskiej. Firma Juvora Ltd zaleca, aby przed wypolerowaniem na wysoki połysk, zastosować szczerotkowanie mechaniczne przy użyciu tarczy polerskiej. Wyrób można wypolerować na wysoki połysk przy użyciu tarczy polerskiej z koziego włosia lub bawełny. Do obróbki wnętrza protez teleskopowych firma Juvora Ltd. zaleca stosowanie drobnych szczotek. Należy stosować drobnoziarnistą pastę polerską (białą).

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

---

Podczas obróbki płyty dentystycznej Juvora™ należy zachować następujące środki ostrożności:

- Maskę przeciwpyłową lub odsysanie pyłu
- Indywidualne środki ochrony (ochrona oczu, rękawiczki)

## Informacje nt. przechowywania

---

Płyta dentystyczna JUVORA™ powinna być przechowywana w suchym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Polimer PEEK, z którego wykonana jest płyta dentystyczna Juvora™ jest stabilny i może być przechowywany przez długi okres (okres trwałości wynosi 10 lat). Jego zakres roboczy temperatury waha się od temperatur kriogenicznych do maksymalnie 250°C, w związku z czym płyta dentystyczna Juvora™ może być przechowywana w dowolnych warunkach temperatury i wilgotności otoczenia.

## Informacje dodatkowe

---

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktować się z adresem [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia związane z przetwarzaniem Ceramill PEEK przez JUVORA™. Pobierz instrukcje przetwarzania @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Indicações

---

Para o fabrico de estruturas utilizadas na produção de:

- i) Dentaduras e sobredentaduras integrais e parciais removíveis;
- ii) Dentaduras de implante e barras de implante;
- iii) Coroas anteriores e posteriores, e pontes posteriores de 3 unidades (máximo 1 pântico).

### Contra-indicações

---

Não utilizar em pontes com 2 ou mais pânticos.

### Precauções

---

Seguir a linha de orientação sobre parâmetros de produção fornecida no guia de processamento da JUVORA™:

- Para coroas secundárias e suportes de matrizes, a espessura mínima não deve ser inferior a 0,7 mm

- Para grelhas de retenção “convencionais”, a espessura mínima não deve ser inferior a 2 mm
- O retentor horizontal no maxilar inferior deve ter um tamanho mínimo de 2 mm x 8 mm
- A faixa horizontal no maxilar superior deve ter um tamanho mínimo de 2 mm x 8 mm

### Informações sobre o material

---

Os discos dentários JUVORA™ são fabricados em polímero Invibio PEEK.

Forma:	Sólida
Odor:	Sem odor
pH (valor):	Desconhecido
Ponto de ebulição (°C):	Desconhecido
Ponto de fusão (°C):	343
Ponto de ignição (°C):	Desconhecido
Temperatura de auto-ignição (°C):	595
Propriedades oxidativas:	Não aplicável
Pressão do vapor (Pascal):	Desconhecido
Solubilidade (água):	Insolúvel



### Instruções de processamento

---

As instruções detalhadas de processamento fornecidas devem ser respeitadas pelos utilizadores finais (laboratórios e técnicos dentários) quando procederem à produção de estruturas a partir do disco dentário JUVORA™. Os laboratórios dentários que pretendam utilizar o disco serão certificados pela Juvora Ltd, através de um processo que envolve a avaliação da capacidade dos mesmos para seguir as linhas de orientação relativas ao processamento, de modo a poderem fabricar estruturas e dentaduras finais de elevada qualidade, quando aplicável, utilizando os equipamentos de que dispõem. Esta avaliação será realizada pela Juvora Ltd ou pelos seus centros de produção certificados.

Encontre mais informações sobre o processamento do PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

### Produção

---

Os discos dentários JUVORA™ virgens apenas podem ser processados em equipamentos de fresagem adequados, com programas de produção apropriados. A cabeça de fresagem tem de ser adequada para maquinar o polímero PEEK. A Juvora Ltd recomenda a adaptação do software CAM por parte do fabricante do software, de modo a permitir a fresagem do disco dentário JUVORA™. Por forma a obter um encaixe perfeito, recomenda-se a utilização de um equipamento de fresagem de 5 eixos e construção estável. A Juvora Ltd recomenda igualmente a refrigeração da cabeça de fresagem, de modo a garantir uma produção mais precisa e prolongar o tempo de vida útil da mesma. \*Consulte a nota de rodapé.

### Remoção da prótese do disco dentário

---

Remova cuidadosamente a prótese do bloco virgem utilizando um instrumento de corte metálico rígido e prestando especial atenção às arestas da prótese.

### Acabamento

---

Para o trabalho de acabamento, recomenda-se a utilização de brocas de corte transversal de metal rígido. São particularmente adequadas brocas de corte transversal simples ou brocas de dentes finos especiais. O acabamento fino posterior de faixas e retentores horizontais pode ser levado a cabo com um polidor de silício. Antes do polimento de alto brilho, a Juvora recomenda a escovagem no motor de polimento. O dispositivo pode ser polido para obtenção de alto brilho com uma roda de polimento de pêlo de cabra ou de lã-algodão. Para os interiores de ligações telescópicas, a Juvora Ltd recomenda escovas finas. Utilize pasta de polimento fina (branca).

### Informações de segurança

---

Durante a fresagem do disco dentário JUVORA™, recomenda-se a adopção das seguintes precauções de segurança:

- Máscara anti-poeiras e extracção de póis
- Equipamento de protecção pessoal (protecção ocular, luvas)

### Informações de armazenamento

---

O disco dentário JUVORA™ deve ser

conservado num local seco e evitar-se a exposição à luz solar directa. O polímero PEEK a partir do qual é fabricado o disco dentário JUVORA™ é estável e pode ser armazenado durante um período de tempo prolongado (prazo de validade de 10 anos). Suporta uma temperatura de trabalho variável desde valores criogénicos até 250°C, portanto, o intervalo de temperatura de armazenamento para o disco dentário Juvora™ é qualquer temperatura e humidade ambientes.

### Informações adicionais

---

Para obter informações adicionais, contacte [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Nota: Siga as instruções do fabricante da máquina sobre o processamento de CERAMILL PEEK pela JUVORA™. Download as instruções de processamento @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

## Indicații

Pentru fabricarea schelelor utilizate în producția de:

- i) Proteze și supraproteze dentare detașabile, totale și parțiale;
- ii) Proteze dentare sprijinite pe implanturi și implanturi cu bară
- iii) Coroane anterioare și posterioare și punți posterioare cu 3 elemente (maxim 1 corp de punte).

## Contraindicații

A nu se utiliza la punți cu 2 sau multe corpuri.

## Precauții

Respectați îndrumările legate de parametrii de frezare din ghidul de prelucrare JUVORA™:

- Grosimea minimă a coroanelor secundare și a corpurilor matricelor nu trebuie să fie sub 0,7 mm
- Grosimea minimă pentru sistemele de retenție „convenționale” nu trebuie să fie sub 2 mm
- Dimensiunea minimă a croșetului orizontal în mandibulă 2 mm x 8 mm

- Dimensiunea minimă a inelului orizontal în maxilar 2 mm x 8 mm

## Informații despre material

Discurile dentare JUVORA™ sunt fabricate din polimer Invibio PEEK.

Formă:	Solidă
Miros:	Inodor
pH (valoare):	Necunoscut
Punct de fierbere (°C):	Necunoscut
Punct de topire (°C):	343
Punct de aprindere (°C):	Necunoscut
Temperatură de autoaprindere (°C):	595
Proprietăți de oxidare:	Nu este cazul
Presiunea de vapori (Pascal):	Necunoscută
Solubilitate (în apă):	Insolubil

### Instrucțiuni de prelucrare

---

Sunt furnizate instrucțiuni de prelucrare detaliate, iar acestea trebuie respectate de către utilizatorul final (laboratoare dentare și tehnicieni) atunci când se taie schelete din discul dentar JUVORA™. Laboratoarele dentare aprovizionate cu discul respectiv vor fi atestate prin intermediul Juvora Ltd., un proces care implică evaluarea capacității acestora de a respecta îndrumările de prelucrare pentru fabricarea scheletelor de înaltă calitate și a protezelor finite, dacă este cazul, utilizând echipamentele existente. Această evaluare va fi efectuată de Juvora Ltd. sau de centrele de frezare atestate ale acestora.

Mai multe informații despre prelucrarea PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

### Producție

---

Discurile dentare JUVORA™ brute pot fi prelucrate numai pe aparate de frezare

adecvate, cu programe de frezare adecvate. Capul de frezare trebuie să fie adecvat pentru prelucrarea polimerului PEEK. Juvora Ltd. recomandă adaptarea adecvată a software-ului CAM de către producătorul software-ului, astfel încât să permită frezarea discului dentar JUVORA™. Pentru a se potrivi perfect, se recomandă un aparat de frezare cu 5 axe, cu o construcție stabilă. De asemenea, Juvora Ltd. recomandă răcirea capului de frezare pentru o frezare mai precisă și pentru a prelungi durata de utilizare a acestuia. \*Vezi nota de subsol.

### Îndepărtarea protezei de pe discul dentar

---

Îndepărtați proteza cu atenție de pe discul brut utilizând un cuțit din metal dur și acordați o atenție deosebită muchiilor protezei.

### Finisare

---

Pentru finisare, se recomandă utilizarea frezelor în cruce din metal dur. Frezele

În cruce simple sau frezele speciale cu dinți fini sunt recomandate în mod particular. Finisarea ulterioară fină a inelelor și a croșetelor orizontale se poate efectua cu un șlefuitor siliconic. Înainte de șlefuirea pentru luciu puternic, Juvora recomandă perierea pe polizorul cu perie. Dispozitivul poate fi șlefuit până la obținerea unui luciu puternic cu un disc cu tampon de vată de bumbac sau cu păr de capră. Pentru partea interioară a anexelor telescopice, Juvora Ltd recomandă perii fine. Utilizați o pastă de polizat fină (albă).

## Informații privind siguranța

---

În timpul prelucrării discului dentar Juvora™, se recomandă următoarele precauții pentru siguranță:

- Purtarea unei măști pentru praf sau extragerea prafului
- Echipament personal de protecție (protecția ochilor, mănuși)

## Informații privind depozitarea

---

Discul dentar JUVORA™ trebuie păstrat într-un loc uscat, evitând expunerea la lumina solară directă. Polimerul PEEK din care este realizat discul dentar Juvora™ este stabil și poate fi păstrat o perioadă lungă de timp (perioada de valabilitate 10 ani). Are un interval de temperaturi de lucru de la criogenie până la 250°C și, astfel, intervalul de temperaturi de păstrare pentru discul dentar Juvora™ este la orice temperatură și la umiditate ambientală.

## Informații suplimentare

---

Pentru informații suplimentare contactați [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Notă: Urmați instrucțiunile producătorului mașinii cu privire la prelucrarea Ceramill PEEK de JUVORA™. Descărcați instrucțiunile de procesare @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

### Indikácie

---

Na výrobu rámov na použitie pri výrobe:

- i) úplne a čiastočne snímateľných protéz a krycích protéz,
- ii) implantátových protéz a závitov k implantátom,
- iii) predných a zadných koruniek a zadných 3-jednotkových mostíkov (maximálne 1 medzičlen).

### Kontraindikácie

---

Nesmie sa používať v mostíkoch s 2 alebo viacerými medzičlenmi.

### Upozornenia

---

Dodržiujte usmernenie v súvislosti s parametrom frézovania uvedené v príručke JUVORA™ týkajúcej sa opracovania:

- Minimálna hrúbka sekundárnych koruniek a puzdier matric by nemala byť menšia ako 0,7 mm.

- Minimálna hrúbka tradičných pridržiacích mriežok by nemala byť menšia ako 2 mm.
- Minimálna veľkosť horizontálneho fixátora na spodnej čeľusti 2 mm x 8 mm.
- Minimálna veľkosť horizontálneho pásu na hornej čeľusti 2 mm x 8 mm.

### Informácie o materiáli

---

Dentálne disky JUVORA™ sa vyrábajú z polyméru Invibio PEEK.

Forma:	Tuhá látka
Zápach:	Bez zápachu.
Hodnota pH:	Neznámy.
Teplota varu (°C):	Neznámy.
Teplota topenia (°C):	343
Teplota vzplanutia (°C):	Neznámy.
Teplota samovznietenia (°C):	595
Oxidačné vlastnosti:	Nevzťahuje sa.
Tlak pár (Pa):	Neznámy.
Rozpustnosť (voda):	Nerozpustné.

### **Pokyny týkajúce sa opracovania**

---

Podrobné pokyny týkajúce sa opracovania sú poskytnuté a koncoví používatelia (zubné laboratória a technici) ich musia dodržiavať pri frézovaní rámov z dentálnych diskov JUVORA™. Zubné laboratória, ktorým sa disky dodávajú, získajú osvedčenie od spoločnosti Juvora Ltd. Tento proces zahŕňa posúdenie ich schopnosti postupovať podľa pokynov na opracovanie pri výrobe kvalitných rámov a hotových protéz podľa ich existujúceho vybavenia. Toto posúdenie vykoná spoločnosť Juvora Ltd alebo jej certifikované strediská.

Več informácií o obdelavi PEEK @ [www.jovoradental.com/academy](http://www.jovoradental.com/academy)

### **Výroba**

---

Predliatky dentálnych diskov JUVORA™ sa môžu spracúvať len na vhodných frézach s vhodnými frézovacími programami. Frézovacia hlavica musí

byť vhodná na opracovanie polyméru PEEK. Spoločnosť Juvora Ltd odporúča, aby výrobca softvéru prispôbil softvér CAM tak, aby umožňoval frézovanie dentálnych diskov JUVORA™. Na dosiahnutie presnosti sa odporúča 5-osová fréza stabilnej konštrukcie. Spoločnosť Juvora Ltd takisto odporúča chladenie frézovacej hlavy na dosiahnutie presnejšieho frézovania a na predĺženie životnosti.

\* Pozri poznámku na konci strany.

### **Vybrať ie protézy z dentálneho disku**

---

Protézu opatrne vyberte z predliatky pomocou tvrdého kovového rezného nástroja a obzvlášť venujte pozornosť okrajom protézy.

### **Dokončovanie**

---

Na dokončovacie práce sa odporúčajú priečne vrtačky z tvrdého kovu. Osobitne vhodné sú hladké priečne vrtačky alebo špeciálne jemné zúbkované vrtačky. Ďalšie jemné dokončovanie

horizontálnych pásov a fixátorov je možné vykonať silikónovým leštidlom. Pred vysokolesklým leštením spoločnosť JUVORA™ odporúča kefovanie na leštiacom motore. Pomôcka môže byť vyleštená do vysokého lesku leštiacim kotúčom z kože srsti alebo vaty. Pre vnútornú časť teleskopických úchytiek spoločnosť Juvora Ltd odporúča jemné kefky. Používajte jemnú (bielu) leštiacu pastu.

### **Bezpečnostné informácie**

---

Pri opracúvaní dentálneho disku JUVORA™ sa odporúčajú nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Protiprachová maska a odsávanie prachu
- Osobné ochranné prostriedky (okuliare, rukavice)

### **Informácie týkajúce sa skladovania**

---

Dentálny disk JUVORA™ sa má skladovať na suchom mieste a nemá byť vystavený

priamemu slnečnému žiareniu. Polymér PEEK, z ktorého je dentálny disk JUVORA™ vyrobený, je stabilný a môže sa skladovať počas dlhšieho obdobia (skladovateľnosť 10 rokov). Jeho pracovný teplotný rozsah sa pohybuje od veľmi nízkych teplôt až po 250°C, a tak teplotný rozsah skladovania pre dentálny disk JUVORA™ zahŕňa akúkoľvek teplotu a vlhkosť prostredia.

### **Ďalšie informácie**

---

Ak chcete získať ďalšie informácie, napíšte na [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Opomba: Upoštievajte navodila vaše naprave proizvajalca v zvezi z obdelavo CERAMILL PEEK ga JUVORA™. Prenesite si navodila za obdelavo @ [www.amangirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amangirrbach.com/instruction-manuals).



## Käyttöaiheet

---

- i) Täysin ja osittain poistettavien hammasproteesien ja ylähammasproteesien,
- ii) implanttihampaistojen ja implanttikiskojen, sekä,
- iii) etu- ja poskihampaiden kruunujen ja taaempien kolmen yksikön siltojen (enintään 1 tekohammas) tuotantoon käytettävien runkojen valmistukseen.

## Vasta-aiheet

---

Ei sovi käytettäväksi siltoihin, joissa on kaksi tai useampia tekohampaita.

## Varotoimet

---

Noudata JUVORA™ ohjekirjassa annettuja jyrsinparametrioheja:

- Sekundaaristen kruunujen ja matriisipesän minimipaksuus ei saa olla alle 0,7 mm.
- "Tavallisten" implanttiverkkojen minimipaksuus ei saa olla alle 2 mm.

- Alaleuan vaakatasoisen kiinnityksen on oltava vähintään 2 mm × 8 mm:n suuruinen.
- Yläleuan pystysidoksen on oltava vähintään 2 mm × 8 mm:n suuruinen.

## Tietoa materiaalista

---

JUVORA™-hammaskiekot valmistetaan Invisio PEEK polymeeristä.

Olomuoto:	Kiinteä
Haju:	Hajuton
pH (arvo):	Ei tiedossa.
Kiehumispiste (°C):	Ei tiedossa.
Sulamispiste (°C):	343
Leimahduspiste (°C):	Ei tiedossa.
Itsesyttymislämpötila (°C):	595
Hapetusominaisuudet:	Ei oleellinen.
Höyrynpaine (Pascal):	Ei tiedossa.
Liukoisuus (vesi):	Liukenematon.

### Käsittelyohjeet

---

Loppukäyttäjien (hammaslaboratorioiden ja teknikkojen) on annettava yksityiskohtaiset käsittelyohjeet ja noudatettava niitä jyrssiessään runkoja JUVORA™ -hammaskiekkosta. Juvora Ltd sertifioi hammaslaboratoriot, joihin kiekkoja toimitetaan. Sertifioinnin yhteydessä varmistetaan laboratorion kyky noudattaa tarvittavia laadukkaiden runkojen ja hammasproteesien valmistusohjeita sillä ennestään olevia välineitä käyttäessään. Arvioinnin suorittaa Juvora Ltd tai sen sertifioima jyrshintakeskus.

Katso lisätietoja käsittelystä PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

### Valmistus

---

JUVORA™ -hammaskiekkoihioita voi käsitellä vain sopivilla jyrsimillä, joissa on asianmukaiset jyrshintäohjelmat.

Jyrsinpään on sovellettava PEEK-polymerin työstämiseen. Juvora Ltd suosittelee käyttämään ohjelmistovalmistajalta saatavaa sopivaa CAM-ohjelmistosovellusta, jolla JUVORA™ -hammaskiekkoa voi jyrsiä. Paras sopivuus saavutetaan käyttämällä vankkarakenteista 5-akselista jyrsinkonetta. Juvora Ltd suosittelee jyrsinpään jäähdytystä, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka jyrshintätulos ja jyrsinpään käyttöaika piteneisi. \*Katso alaviitettä.

### Proteesin irrotus hammaskiekkosta

---

Irrota proteesi aihioista varovasti kovametallileikkurilla, ja ole erityisen tarkkana proteesin reunoissa.

### Viimeistely

---

Viimeistelyyn suositellaan kovametallista uurrettua jyrsinkärkeä. Tarkoitukseen soveltuvat erityisen hyvin tavalliset uurretut kärjet tai

erikoisen hienohampaiset kärjet. Vaakasidosten ja vaakatasoisten kiinnitysten jatkoviimeistelyssä voidaan käyttää silikonikärkistä kiillotuslaikkaa. JUVORA™ suosittelee kiillotusmoottorin harjausta ennen viimeistelykiillotusta. Laitteen viimeistelykiillotukseen voidaan käyttää vuohenkarvaista tai puuvillaista kiillotuslaikkaa. Juvora Ltd suosittelee hienoja harjoja teleskooppikiinnitysten sisäpuolta varten. Käytä hienoa (valkoista) kiillotustahnaa.

## Turvallisuustiedot

---

JUVORA™-hammaskiekkoa työstäessä suositellaan käytettäväksi seuraavia suojaustoimenpiteitä:

- kasvojen pölysuojainta tai pölynpoistojärjestelmää
- henkilökohtaisia suojavarusteita (silmäsuojaimia, käsineitä).

## Säilytys

---

JUVORA™-hammaskiekkko säilytetään

kuivassa ja suoralta auringonvalolta suojattuna. PEEK -polymeeri, josta Juvora™-hammaskiekkko on valmistettu, on stabiloitu ja sitä voidaan säilyttää pidemmänkin ajan (10 vuoden säilytysaika). Sen työstämislämpötila on kryogeenisestä 250°C:een ja näin ollen JUVORA™-hammaskiekkon voi säilyttää missä huoneenlämpötilassa ja -kosteudessa tahansa.

## Lisätietoja

---

Lisätietoja yhteysosoitteesta:  
[info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*Huomaa: Noudata koneen valmistajan käsittelyä koskevat CERAMILL PEEK mukaan JUVORA™. Lataa käsittelyohjeemme @ [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).

## Indikationer

---

För tillverkningen av ställningar som används i produktionen av:

- i) Helt och delvist avtagbar tandprotes och överproteser.
- ii) Protes på implantat och barkonstruktion för implantatburen protes.
- iii) Främre och bakre kronor och bakre bryggor med 3 enheter (högst en bromellanled).

## Kontraindikationer

---

Får inte användas i bryggor med 2 eller flera bromellanleder.

## Försiktighetsåtgärder

---

Följ vägledningen för fräsparametrar i Juvoras bearbetningsanvisningar:

- Minsta tjocklek på sekundära kronor och matriser ska inte vara mindre än 0,7 mm

- Minsta tjocklek för "konventionella" retentionsnät ska inte vara mindre än 2 mm
- Minsta storlek på horisontellt retentionsystem i underkäken ska vara 2 mm x 8 mm
- Minsta storlek på horisontellt band i överkäken ska vara 2 mm x 8 mm

## Material

---

JUVORA™ tandskivor tillverkas av Invibio PEEK polymer

Form:	Fast
Lukt:	Luktfri.
pH (värde)	Okänt.
Kokpunkt (°C):	Okänt.
Smältpunkt (°C):	343
Övertändningspunkt (°C):	Okänt.
Självtändningstemperatur (°C):	595
Oxideringsegenskaper:	Ej relevant.
Ångtryck (Pascal):	Okänt.
Löslighet (vatten):	Olöslig.

## Bearbetningsanvisningar

---

Detaljerade bearbetningsanvisningar tillhandahålls och måste följas av slutanvändarna (tandlabb och tekniker) när ställningarna från JUVORA™ tandskiva tillverkas. Tandlabb som utrustas med tandskivan kommer att certifieras genom Juvora Ltd, en process som involverar en bedömning av deras förmåga att följa bearbetningsriktlinjerna för tillverkningen av ställningar och färdiga proteser av hög kvalitet där så är tillämpligt med hjälp av deras befintliga utrustning. Denna bedömning genomförs av Juvora Ltd eller deras certifierade tillverkningscenter.

Mer information om behandlingen av PEEK @ [www.juvoradental.com/academy](http://www.juvoradental.com/academy)

## Produktion

---

JUVORA™ tandskivsämnerna kan endast bearbetas på lämpliga fräsmaskiner med lämpliga fräsprogram.

Fråshuvudet måste vara lämpligt för maskinbearbetning av PEEK polymer. Juvora Ltd rekommenderar att en lämplig anpassning av CAM-programvaran görs av programvarutillverkaren så att fräsning av JUVORA™ tandskiva möjliggörs. För exakt passning rekommenderas en 5-axlad fräsmaskin av stabil konstruktion. Juvora Ltd rekommenderar även en avkylning av fråshuvudet för en mer exakt fräsning och för förlängning av dess livslängd. \*Se fotnot.

## Borttagning av proteserna från tandskivan

---

Ta bort proteserna försiktigt från ämnet med en hård metallkniv och ägna särskild uppmärksamhet åt proteskanterna.

## Polering

---

För polering rekommenderas fissurborr i hårdmetall. Raka fissurborr eller fintandade specialborr är särskilt lämpliga. Ytterligare finputsning av horisontella band och hållare kan

utföras med en kiselpolerare. Juvora Ltd rekommenderar polermotorborstning före högglanspolering. Enheten kan högglanspoleras med en polerskiva av gethår eller bomull. Juvora Ltd rekommenderar fina borstar för insidan av teleskopfästen. Använd fin (vit) polerpasta.

### Säkerhetsinformation

---

Vid maskinbearbetning av JUVORA™ tandskiva rekommenderas följande säkerhetsåtgärder:

- Ansiktsmask eller dammextraktion
- Personlig skyddsklädsel (ögonskydd, handskar)

### Förvaringsinformation

---

JUVORA™ tandskiva ska förvaras torrt och skyddad från direkt solljus. PEEK polymeren som Juvora™ tandskiva är gjord av är stabil och kan förvaras under lång tid (livslängd 10 år). Den har en arbetstemperatur från

kryotisk upp till 250 °C och därmed är temperaturintervallet för JUVORA™ tandskiva vilken omgivande temperatur och luftfuktighet som helst.

### Ytterligare information

---

För ytterligare information kontakta [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com).

\*OBS: Följ instruktionerna från maskintillverkaren om behandlingen av CERAMILL PEEK av JUVORA™. Ladda ner bearbetningsinstruktioner @ [www.amanggirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanggirrbach.com/instruction-manuals).

### Endikasyonları

Aşağıda belirtilenlerin üretiminde kullanılan alt yapıların üretimi içindir:

- Tamamen ve kısmen çıkarılabilen protezler ve takma dişler;
- İmplant protezler ve implant bar'lar;
- Anterior ve posterior kronlar ve posterior 3 birim köprüler (maksimum 1 pontik).

### Kontrendikasyonları

2 veya daha fazla pontik olan köprülerde kullanılamaz.

### Önlemler

JUVORA™ işleme rehberinde belirtilen frezeleme parametresi talimatlarını takip edin:

- Sekonder kronların ve matris yerleşimlerinin minimum kalınlığı 0,7 mm'den küçük olmamalıdır
- "Klasik" tutulma gridlerinin minimum kalınlığı 2 mm'den küçük olmamalıdır

- Alt çenedeki yatay tutucunun minimum ebadı 2 mm x 8 mm olmalıdır
- Üst çenedeki yatay bandın minimum ebadı 2 mm x 8 mm olmalıdır

### Materyal Bilgileri

JUVORA™ dental diskler Invibio PEEK polimerden üretilmiştir.

Form:	Katı
Koku:	Kokusuz
pH (Değer):	Bilinmiyor
Kaynama Noktası (°C):	Bilinmiyor
Erime Noktası (°C):	343
Parlama Noktası (°C):	Bilinmiyor
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C):	595
Oksitlenme Özelliği:	Geçerli Değil
Buhar Basıncı (Pascal):	Bilinmiyor
Çözünürlük (Suda):	Çözünmez

### İşleme Talimatları

---

Ayrıntılı işleme talimatları verilmiştir ve son kullanıcılar (dental laboratuvar görevlileri ve teknisyenler) JUVORA™ dental disk'ten alt yapı frezelerken bu talimatlara uymalıdır. Diskin temin edildiği laboratuvarlar, gerektiğinde mevcut ekipmanlarını kullanarak yüksek kaliteli alt yapılar ve bitirilmiş protezler hazırlamak için verilen işleme talimatlarına uyma becerilerinin değerlendirileceği bir süreç sonunda Juvora Ltd. aracılığıyla sertifika alacaktır. Bu değerlendirme Juvora Ltd. veya Juvora Ltd'nin ruhsatlı frezeleme merkezleri tarafından yapılacaktır.

PEEK @ [www.juvoradental.com/academy/](http://www.juvoradental.com/academy/)'nin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

### Üretim

---

JUVORA™ dental disk ham malzemeleri yalnızca uygun frezeleme programlarının bulunduğu uygun frezeleme makineleri ile

işlenebilir. Frezeleme başlığı, PEEK polimer işlemeye uygun olmalıdır. Juvora Ltd, JUVORA™ dental diskin frezelenebilmesi için CAM yazılımının yazılım üreticisi tarafından uygun şekilde uyarlanması tavsiye eder. Tam olarak oturması için sabit konstrüksiyonlu 5 eksenli bir frezeleme makinesi tavsiye edilir. Juvora Ltd ayrıca, daha hassas frezeleme ve hizmet ömrünün uzatılması için frezeleme başlığının soğutulmasını tavsiye eder. \*Bkz. dipnot.

### Protezin Dental Disk'ten çıkarılması

---

Sert metal kesici kullanarak protezi ham malzemeden dikkatle çıkarın, protezin kenarlarına özellikle dikkat edin.

### Bitirme

---

Bitirme işlemi için sert metal çapraz kesilmiş bur'lar önerilir. Düz çapraz kesilmiş bur'lar veya özel ince dişli bur'lar özellikle uygundur. Yatay bantların ve tutucuların daha da ince bir şekilde bitirilmesi işlemi silikon parlatma makinesi yardımıyla gerçekleştirilebilir. Juvora,



yüksek kaliteli parlak parlatma için parlatma motorunda fırçalanmasını önerir. Ayrıt, keçi tüyü veya pamuk bir parlatma çarkı ile parlak bir şekilde cilalanabilir. Juvora Ltd, iç içe geçmiş ek parçaların içinde ince fırça kullanılmasını önerir. İnce (beyaz) cila macunu kullanın.

## Güvenlik Bilgileri

JUVORA™ dental disk işlenirken aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alınması tavsiye edilir:

- Toz maskesi veya toz giderme sistemi
- Kişisel koruyucu donanım (göz koruyucu, eldiven)

## Saklama Bilgileri

JUVORA™ dental disk kuru bir yerde muhafaza edilmeli ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. JUVORA™ dental disk in üretildiği PEEK polimer stabildir ve uzun süre (10 yıllık raf ömrü) saklanabilir. Çalışma sıcaklığı kriyojenik sıcaklık seviyesi ile 250°C arasındadır, bu nedenle JUVORA™ dental disk herhangi bir ortam sıcaklığı ve nem seviyesinde

muhafaza edilebilir.

## Ek Bilgi

Ek bilgi için [info@Juvoradental.com](mailto:info@Juvoradental.com) adresini ziyaret edin.

\*Not: CERAMILL PEEK'in JUVORA™ tarafından işlenmesi ile ilgili makine üreticinizin talimatlarını izleyin. İşlem talimatlarını @ [www.amanngirrbach.com/](http://www.amanngirrbach.com/) instruction-manuals adresinden indirin.





# Juvora

---



Juvora Ltd  
Technology Centre, Hillhouse International,  
Thornton Cleveleys, Lancashire, FY5 4QD, UK

**DISTRIBUTION**

Amann Girschbach AG  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
[www.amangirschbach.com](http://www.amangirschbach.com)  
Tel: +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119

[www.invibio.com/dental](http://www.invibio.com/dental)